



ULINE H-6480
6-PANEL SPLITCUP™
DRUG TEST KIT

1-800-295-5510
 uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
 Pour le français, consulter les pages 5-6.

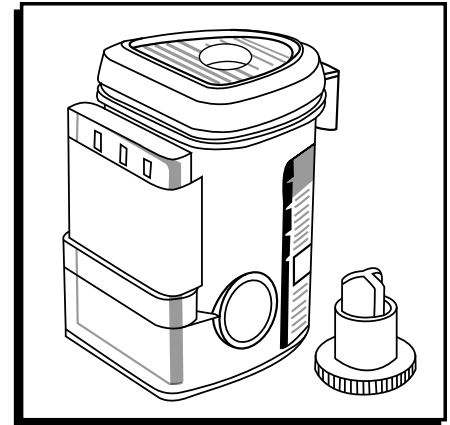

PARTS

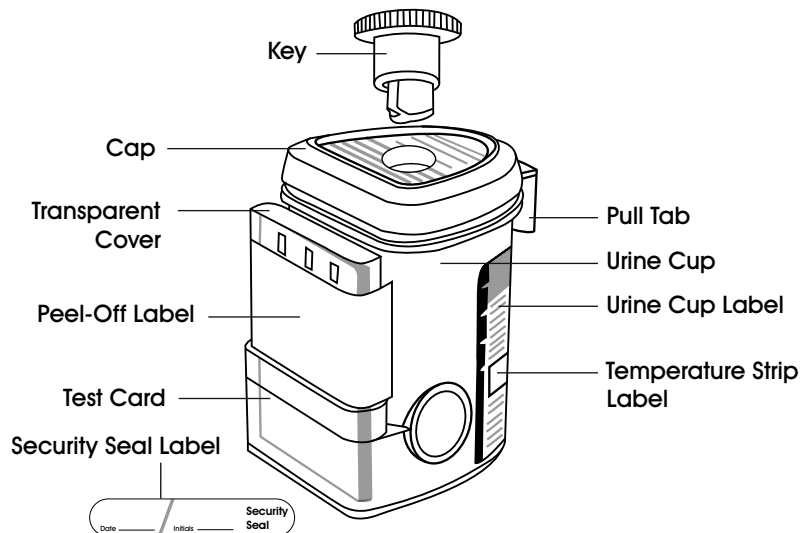


SENSITIVITY

Test yields a positive result when concentration of specimen exceeds:

DRUG	CONCENTRATION
Amphetamine	1,000 ng/mL
Cocaine metabolite	300 ng/mL
Marijuana (THC-COOH)	50 ng/mL
Methamphetamine	1,000 ng/mL
Methylenedioxymethamphetamine	500 ng/mL
Opiates (Morphine)	2,000 ng/mL
Phencyclidine	25 ng/mL


PROCEDURE

1. Open cap with the pull tab. (Key is held by technician.) (See Figure 1)

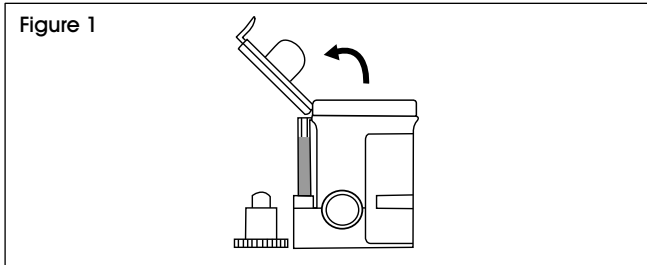


2. Donor provides specimen and secures cap. (See Figure 2)


 **NOTE:** Secure cap by pressing down on the pull tab until it clicks.

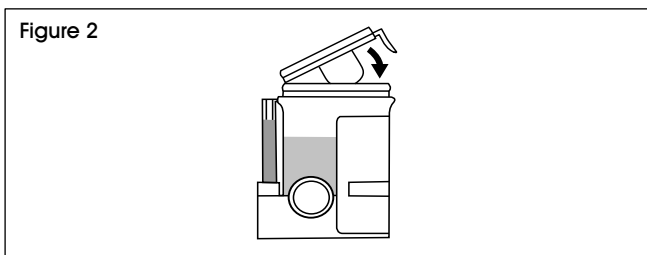


3. Check cap for tight seal. Technician dates and initials the security seal and places security seal over cap. (See Figure 3)

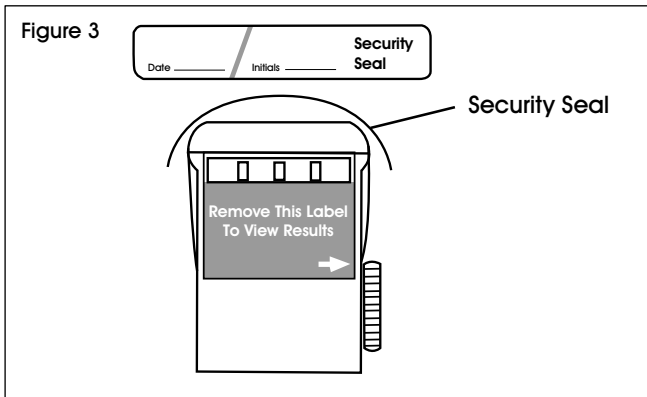


4. On a flat surface, technician inserts key and pushes in. (See Figure 4)

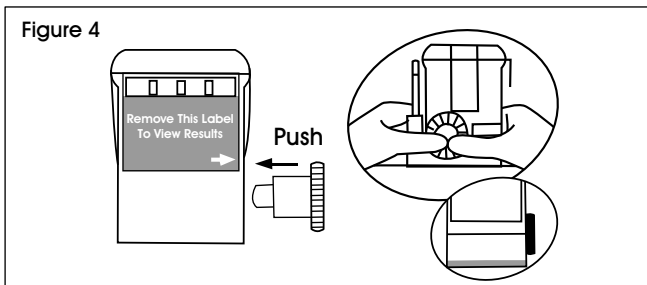


5. Peel off the label to view results. (See Figure 5)

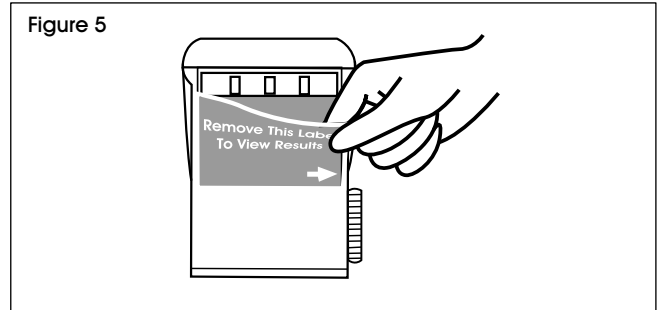

6. Read adulteration test results between 3–5 minutes. (See Figure 6)

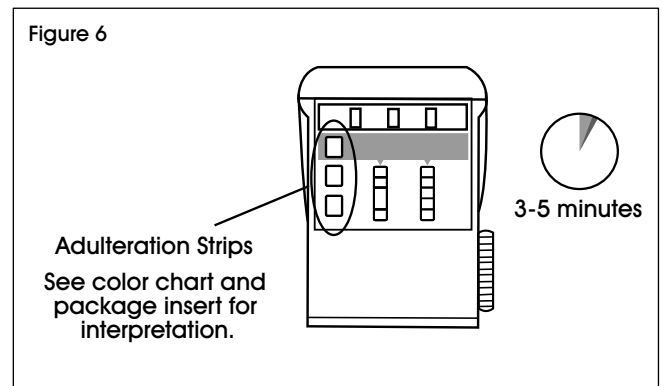

7. Read drug test results at 5 minutes. (See Figure 7)

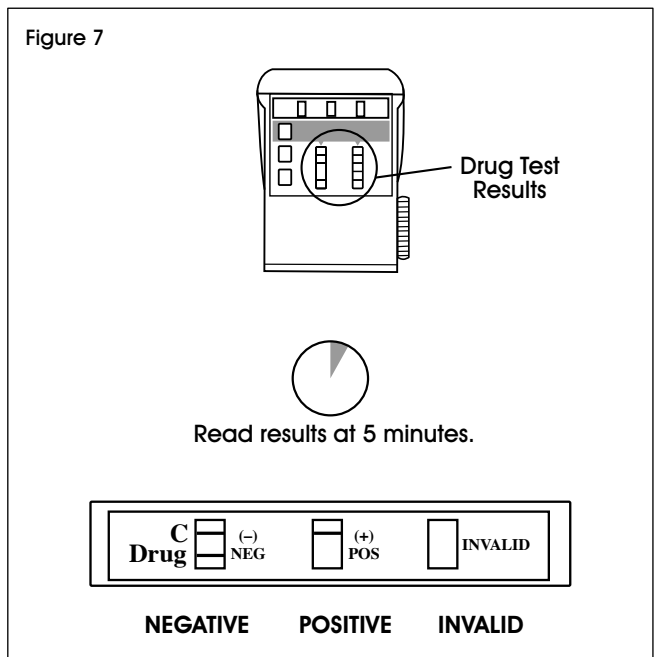


8. A photocopy of the results can be made by placing the entire cup with the card face down on a copier.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-6480
SPLITCUP™ KIT DE 6
PANELES PARA PRUEBA
ANTIDROGAS

800-295-5510
 uline.mx

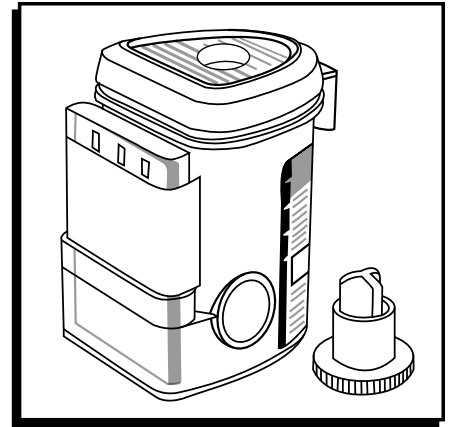

PARTES

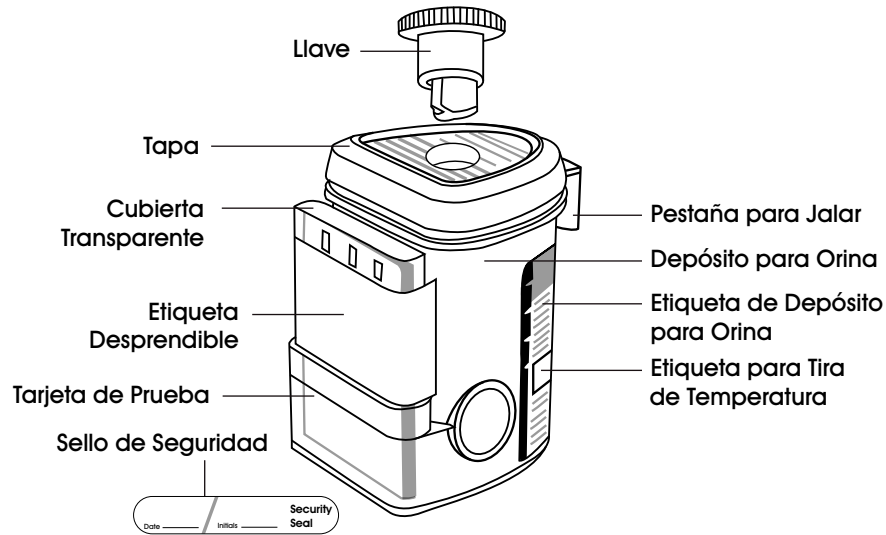


SENSIBILIDAD

La prueba indica un resultado positivo cuando la concentración de la muestra excede:

DROGA	CONCENTRACIÓN
Anfetamina	1,000 ng/mL
Metabolito de cocaína	300 ng/mL
Marihuana (THC-COOH)	50 ng/mL
Metanfetamina	1,000 ng/mL
Metilendioximetanfetamina	500 ng/mL
Opiáceos (Morfina)	2,000 ng/mL
Fenciclidina	25 ng/mL


PROCEDIMIENTO

1. Abra la tapa jalando la pestaña. (La llave la conserva el técnico). (Vea Diagrama 1)

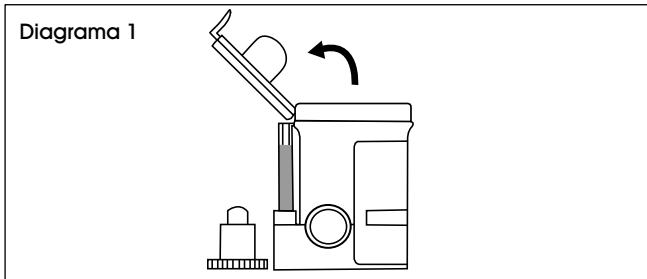


2. El donante proporciona la muestra y asegura la tapa. (Vea Diagrama 2)


 **NOTA:** Asegure la tapa presionando la pestaña hacia abajo hasta que haga clic.

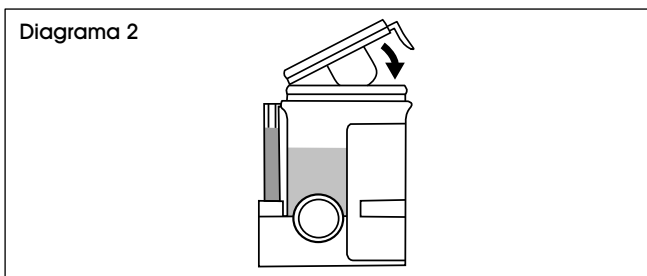


3. Revise que la tapa esté cerrada herméticamente. El técnico escribe la fecha e iniciales en el sello de seguridad y coloca el sello de seguridad sobre la tapa. (Vea Diagrama 3)

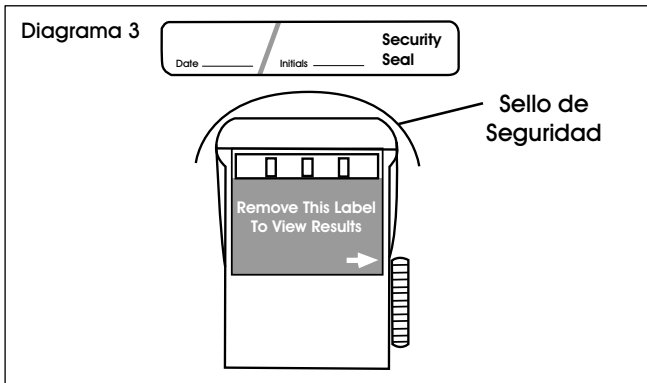


4. Sobre una superficie plana, el técnico inserta la llave y la empuja. (Vea Diagrama 4)

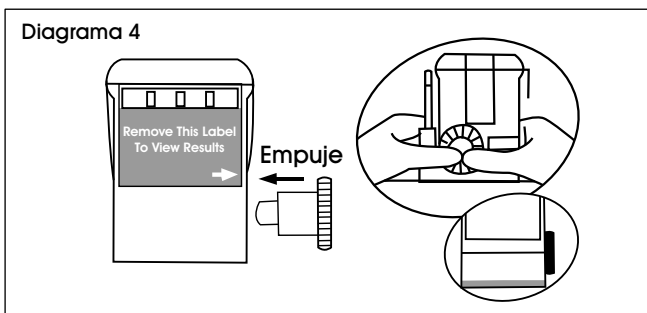


5. Desprenda la etiqueta para ver los resultados. (Vea Diagrama 5)

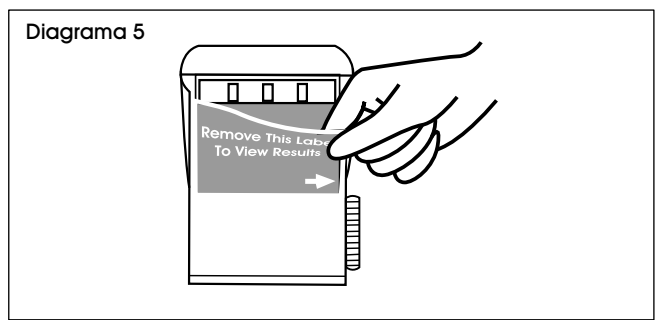

6. Lea los resultados de la prueba de adulteración entre 3-5 minutos. (Vea Diagrama 6)

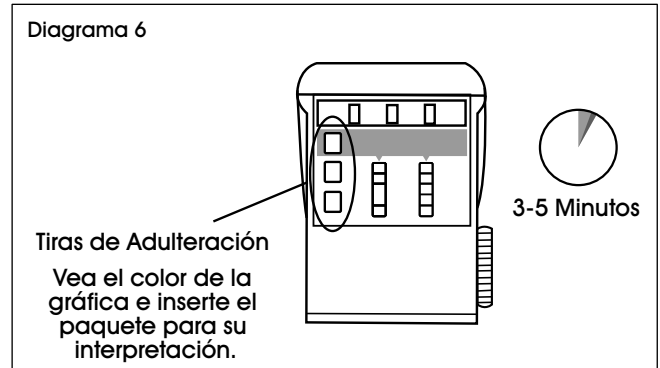

7. Podrá leer los resultados de la prueba en 5 minutos. (Vea Diagrama 7)

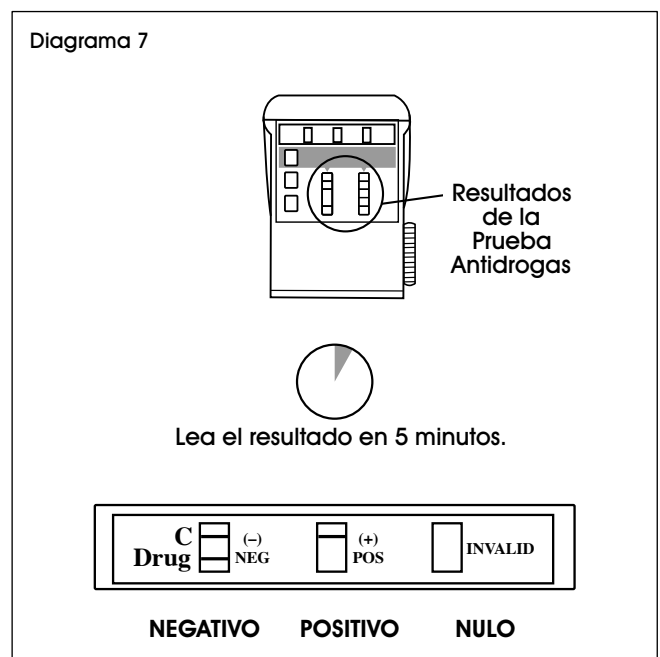

8. Puede sacar una copia de los resultados colocando el depósito completo con la tarjeta hacia abajo sobre la copiadora.


ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-6480

**SPLITCUP^{MC} – TROUSSE POUR
TEST DE DÉPISTAGE DES
DROGUES – 6 PANNEAUX**

1 800 295-5510
uline.ca

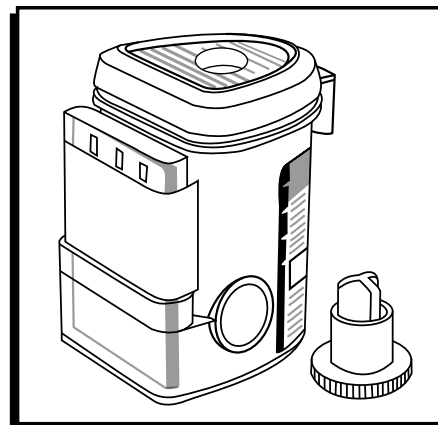

PIÈCES

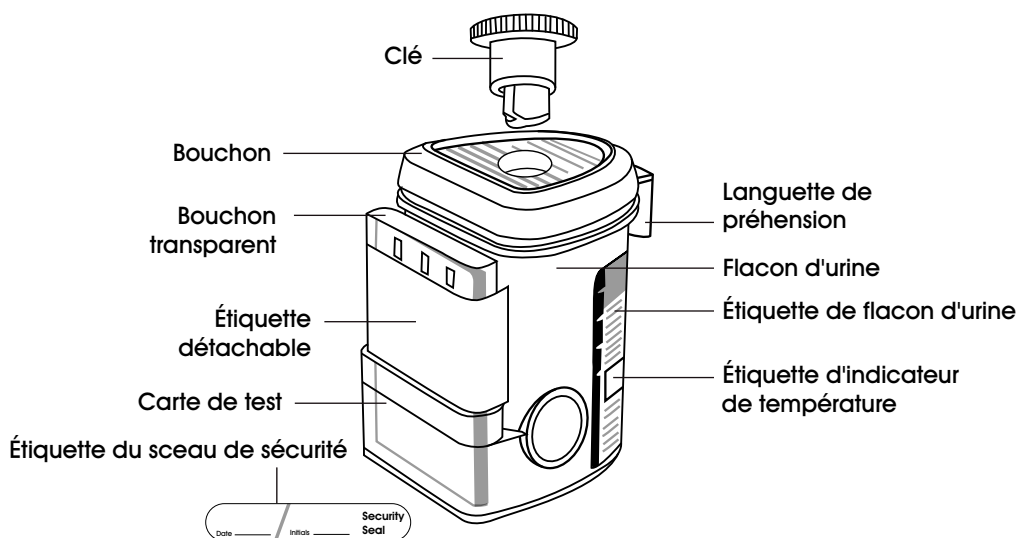


SENSIBILITÉ

Le résultat du test est positif si la concentration des échantillons excède :

DROGUE	CONCENTRATION
Amphétamine	1 000 ng/mL
Métabolite de cocaïne	300 ng/mL
Cannabis (THC-COOH)	50 ng/mL
Méthamphétamine	1 000 ng/mL
Méthylènedioxyméthamphétamine	500 ng/mL
Opiacés (Morphine)	2 000 ng/mL
Phencyclidine	25 ng/mL


PROCÉDURE

1. Enlevez le bouchon à l'aide de la languette de phérension. (La clé est retenue par le technicien). (Voir Figure 1)

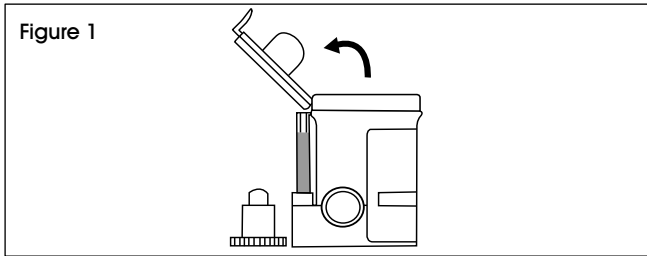


2. Le donneur fournit l'échantillon et sécurise le bouchon. (Voir Figure 2)


 **REMARQUE : Appuyez sur les trois coins du couvercle pour le sécuriser.**

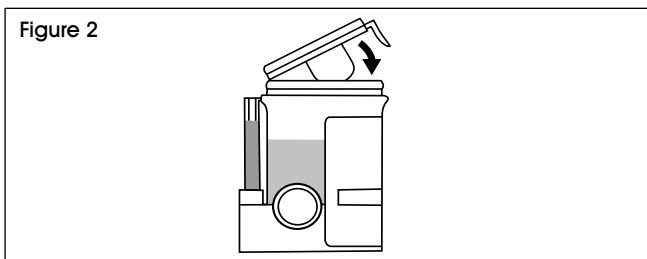


3. Vérifiez que le bouchon forme un joint étanche. Le technicien doit inscrire la date et ses initiales sur le sceau de sécurité et le coller par-dessus le bouchon. (Voir Figure 3)

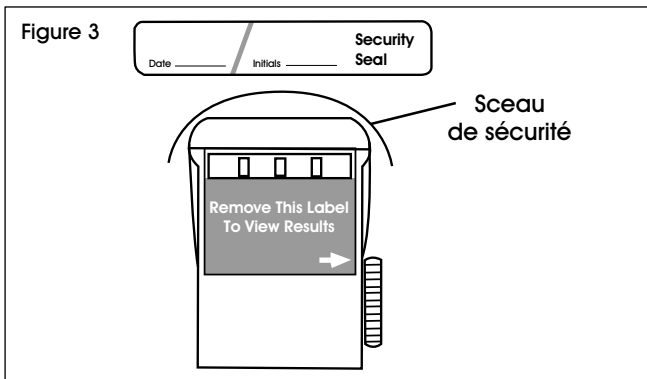


4. En s'assurant que le flacon est placé sur une surface plane, le technicien introduit la clé à fond. (Voir Figure 4)

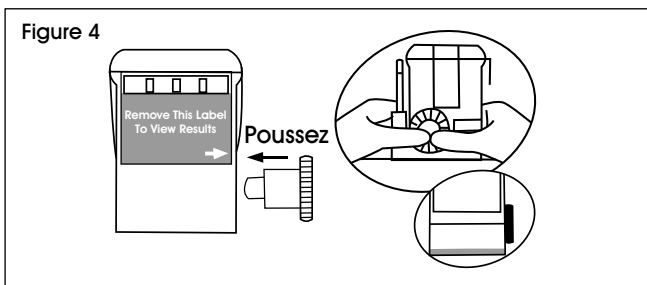


5. Enlevez l'étiquette détachable pour lire les résultats. (Voir Figure 5)

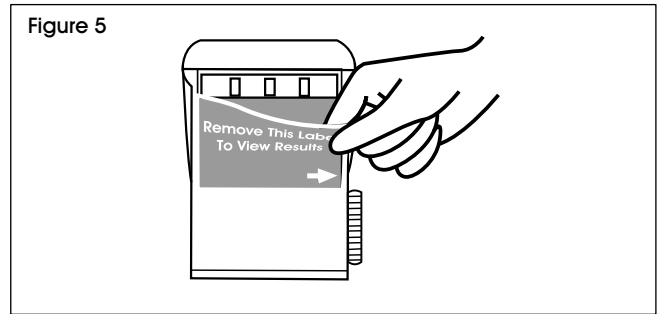

6. Lisez les résultats du test d'adultération entre 3 à 5 minutes. (Voir Figure 6)

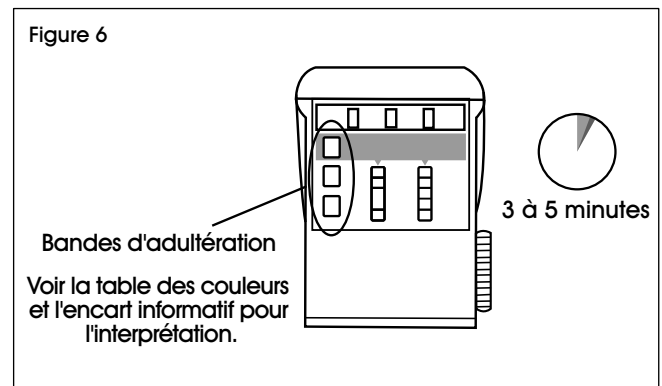

7. Lisez les résultats du test après 5 minutes. (Voir Figure 7)

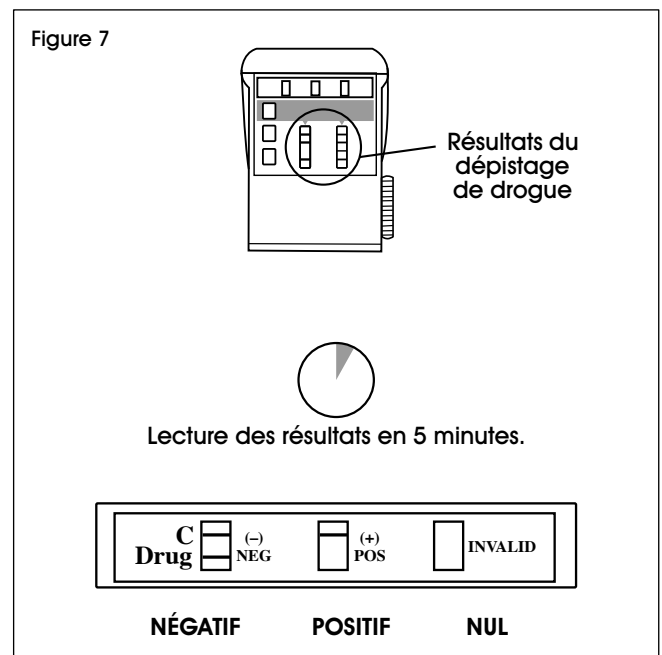

8. Une photocopie des résultats peut être faite en plaçant le flacon et l'étiquette de la carte de test contre la photocopieuse.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca